





JDENTAL CARE
just smile




MADE IN ITALY

Назальный Имплантат
JD MVSAL[®]

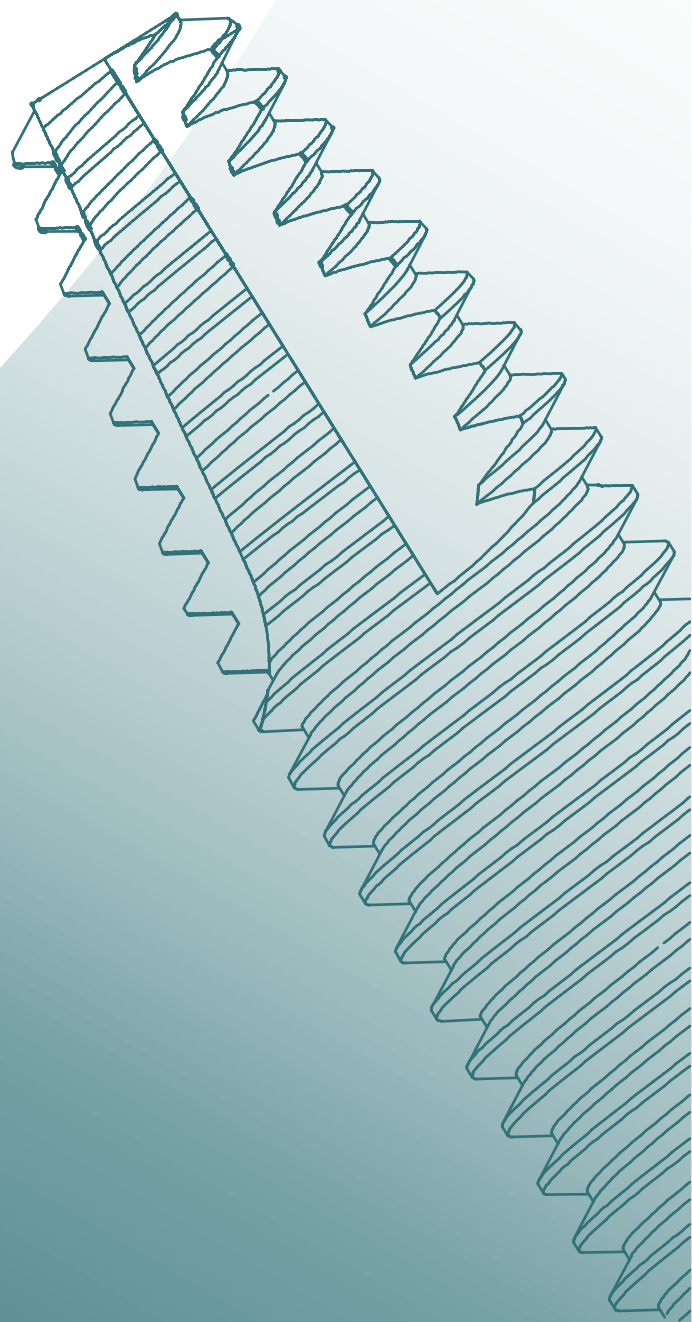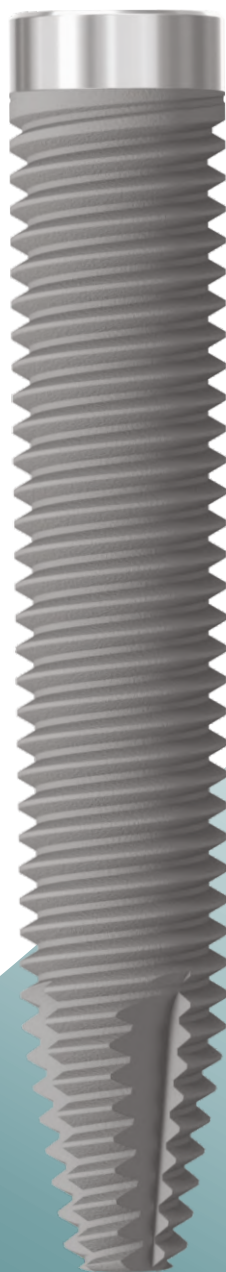

Назальная опора


НАЗАЛЬНАЯ ОПОРА

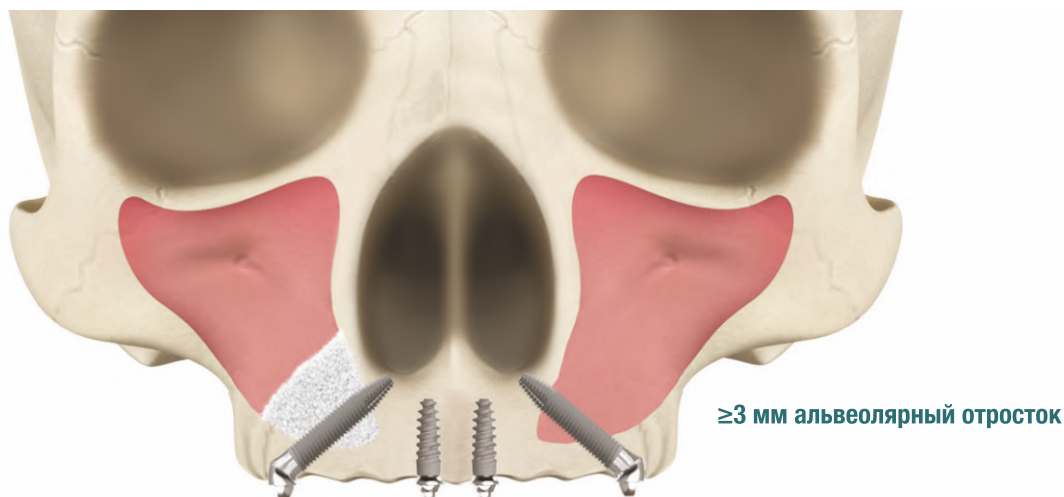

При сильной резорбции верхней челюсти нужно использовать назальные имплантаты, чтобы задействовать назальную кость JD Nasal Implants позволяют использовать кость носовой пазухи. Место имплантации начинается в альвеолярном гребне у премоляра и заканчивается в кости, разделяющей верхнечелюстную пазуху и полость носа. Специализированные имплантаты должны быть достаточно длинны чтобы охватить гайморову пазуху, и они должны быть установлены под наклоном. Имплантат JD Nasal доступен длиной до 26 мм. Хирург может добавить костный трансплантат или нет. Прежде чем принять решение о проведении этой процедуры, необходимо убедиться в отсутствии признаков инфекции носовых пазух.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зубной имплантат JD Nasal доступен в диаметрах и длинах, указанных в таблице:

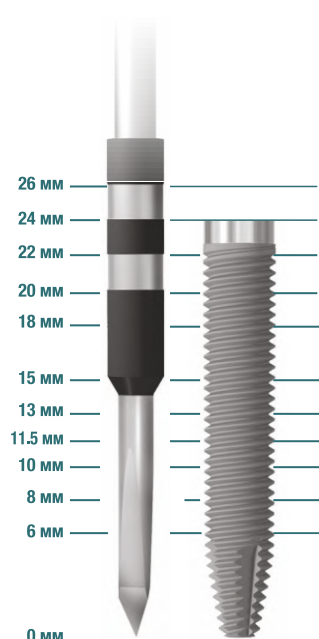

Имплантат JD Nasal рассчитан на максимальное окончательное усилие при установке имплантата не менее 45 Нсм и не более 90 Нсм.

ДИАМЕТР ИМПЛАНТАТА	АПИКАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР	ДЛИНА			
Ø 4.0	2.4	20	22	24	26

Примечание: все измерения указаны в мм.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Имплантат с фрезерованной шейкой и винтом–заглушкой:

NA40200:	JDNasal Ø4.0 Длина 20
NA40220:	JDNasal Ø4.0 Длина 22
NA40240:	JDNasal Ø4.0 Длина 24
NA40260:	JDNasal Ø4.0 Длина 26




Сверла JDNasal:

JDNPR	Зонд глубиномер 26мм JDNasal
JDDR20L	Сверло Ø2.0 JDNasal
JDDR24L	Сверло Ø2.4 JDNasal
JDIDNA	Стартовое сверло JDNasal
JDDRNA24	Спиральное сверло Ø2.4 JDNasal
JDDR20	Спиральное сверло Ø2.0
JDDR24	Спиральное сверло Ø2.4
JDDR28	Спиральное сверло Ø2.8
JDDR32	Спиральное сверло Ø3.2
JDDR36	Спиральное сверло Ø3.6



Навигационные сверла JDNasal:

JDGD20-200	Навигационное сверло Ø2.0 Высота 20
JDGD24-200	Навигационное сверло Ø2.4 Высота 20
JDGD20-220	Навигационное сверло Ø2.0 Высота 22
JDGD24-220	Навигационное сверло Ø2.4 Высота 22
JDGD20-240	Навигационное сверло Ø2.0 Высота 24
JDGD24-240	Навигационное сверло Ø2.4 Высота 24
JDGD20-260	Навигационное сверло Ø2.0 Высота 26
JDGD24-260	Навигационное сверло Ø2.4 Высота 26

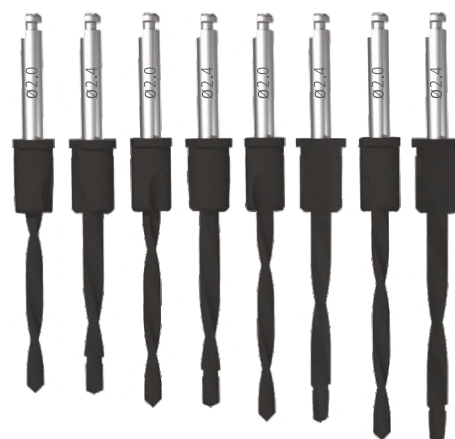

Хирургический набор JDNasal:

JDNAKF	Набор сверел JDNasal Kit Full
JKIT02	Набор навигационных сверел JDGuided Extra Kit

Протезные решения:

Соединение JDNasal совместимо с JDEvolution Plus+



JDENTALCARE

jdentalcare.com



MADE IN ITALY


JDentalCare srl

Via Dino Campana 2,
41123 Modena

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
ООО "Имплант Сервис"

г. Москва, ул. Рождественка, дом 5/7,
строение. 2, Э 3 пом. V К 4 ОФ 261

Тел. +7 (978) 867-15-50 | +7 (916) 665-55-50

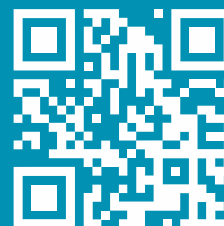

jdentalcare.ru